



PERFORATEURS CRÂNIENS



PRODUIT À USAGE UNIQUE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Vitalys Surgical



SIÈGE SOCIAL FRANCE & EXPORT
193 Bd de Laval, 35500 VITRÉ - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 90 64 00 40
Fax : +33 (0)2 90 64 00 42

SERVICE COMMERCIAL EXPORT
Tél. : +33 (0)2 90 64 00 41

SERVICE COMMERCIAL FRANCE
Tél. : +33 (0)2 90 64 00 40

© grenandwhite.fr - Imprimé en France. Réf. 0106-00-00 - 01/01/2020



ADULTE



ADOLESCENT



PÉDIATRIQUE

CE 0459 ASKORN MEDICAL - Tél. : +33 (0)2 23 35 53 35 - 44c rue de Bray, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ - FRANCE

www.vitalys-surgical.com

www.vitalys-surgical.com

Vitalys Surgical est une société française, installée en Bretagne et spécialisée dans le domaine de la neurochirurgie.

Tous les produits développés ont fait l'objet d'une **recherche expérimentée par des ingénieurs** d'un bureau d'études spécialiste du secteur chirurgical ISO 13485.



Vitalys Surgical vous propose une gamme de **perforateurs crâniens 100 % MADE IN FRANCE**, déclinée en **3 tailles pour s'adapter à chaque morphologie** :

ADULTE

ADOLESCENT

PÉDIATRIQUE

> **Au service des neurochirurgiens**

Le fondateur de Vitalys Surgical, Pierre-Yves Collerai, bénéficie d'une expérience importante aux côtés de neurochirurgiens en salle d'opération et dans le secteur des dispositifs médicaux implantables. C'est par l'observation de leurs pratiques opératoires qu'il a su mettre au point ses produits. Sa gamme de perforateurs crâniens innovants a pour but d'**optimiser le geste, le confort et la sécurité du praticien.**

> **Une R&D très aboutie**

Les dispositifs médicaux proposés ont été conçus par la R&D de manière à apporter aux neurochirurgiens **une gamme appropriée à chaque anatomie du crâne, un confort d'utilisation et une totale sécurité.** Un **brevet** a été déposé afin de protéger le concept d'**embrayage-débrayage** du perforateur crânien VitalDrill.

> **Un process sécurisé**

La sécurité du perforateur réside avant tout dans :

- La **pointe centreuse anti-glisement** à l'amorçage de la perforation ;
- Le **parfait fraisage** des dents du perforateur ;
- Le **débrayage immédiat** au moment opportun, à chaque fin de perforation ;
- L'**obtention d'une capsule osseuse**, en fin de perforation, formant un bouclier de protection entre la fraise du perforateur et la dure-mère. Ce gage de sécurité est confortable et rassurant pour le praticien qui peut ainsi s'assurer une garantie totale et systématique de son geste opératoire.

Chaque perforateur est **contrôlé 5 fois**, avec mise en action du mécanisme, avant d'être mis sous blister.

> **Service France & International**

Vitalys Surgical et son équipe commerciale est à votre écoute, **en France ou à l'international**, afin de répondre à vos demandes.



Tous nos perforateurs crâniens sont **auto-débrayables et à usage unique.**



TAILLE **ADULTE** Ø 14/11

Référence 0106-03-00



VitalDrill ADULTE

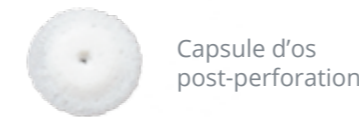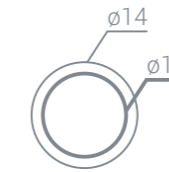

TAILLE **ADOLESCENT** Ø 11/7

Référence 0106-02-00

VitalDrill ADO

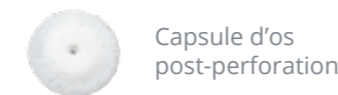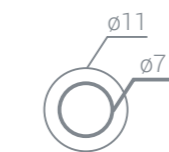

TAILLE **PÉDIATRIQUE** Ø 9/6

Référence 0106-01-00

VitalDrill ENFANT

