

Distribué par



# VIS CERVICALE DE DISTRACTION

## Type Caspar



# VIS CERVICALE DE DISTRACTION

## Type Caspar

Les vis de distraction s'utilisent en chirurgie de la colonne vertébrale pour redresser le corps vertébral afin de permettre l'accès au disque intervertébral. Elles sont insérées dans le corps vertébral à la main, à l'aide d'un tournevis. En cas de retrait du disque intervertébral, les vis sont insérées et étendues pour ouvrir l'espace du disque avant son extraction.


La conception cannelée et la conception de filetage auto taraudeur permettent un placement sûr dans l'os vertébral.

Au moins **2 vis** sont nécessaires pour chaque procédure (une dans le corps vertébral supérieur et une dans le corps vertébrale inférieur.)



Le choix de la longueur de la vis dépend de l'état de l'os.

Les vis sont compatibles avec tous les types d'ensembles d'instruments de distraction Caspar.

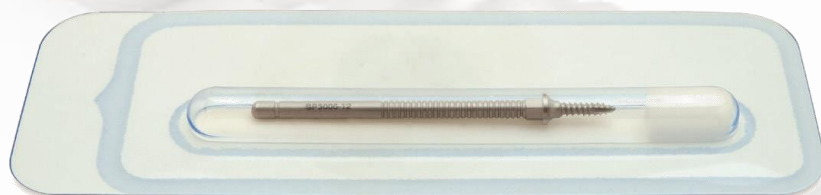

Les vis de distraction Caspar sont fabriquées en acier inoxydable chirurgical 1.4441.

Dispositif médical : **Classe II.a**

**Stérile – Usage Unique**

Durée de Vie : **5 ans**

Stérilisation : **rayonnement gamma** selon la norme EN 11137.



Les vis de distraction Caspar sont fournies **stériles** et à **usage unique** dans un emballage individuel (sous forme de **blister** avec *protection en mousse sur les pointes*), par boîte carton de **10 unités**.

# VIS CERVICALE DE DISTRACTION

## Type Caspar

### Information de Commande

Référence	Description	Packaging	Qté/Cdt
Post longueur de la vis : 7cm			
SP3006-12	Vis Cervicale de Distraction Type Caspar 12 mm	Boîte carton	10 unités
SP3006-14	Vis Cervicale de Distraction Type Caspar 14 mm	Boîte carton	10 unités
SP3006-16	Vis Cervicale de Distraction Type Caspar 16 mm	Boîte carton	10 unités



Distribué par



193 Boulevard de Laval – 35500 VITRÉ (FRANCE)  
Tel France : +33 (0)2 90 64 00 40 – Tel Export : +33 (0)2 90 64 00 41  
[www.vitalys-surgical.com](http://www.vitalys-surgical.com)



Distribué par



REV.02 - Nov. 2020

CE 00120

Mercian Surgical Supply Co. Ltd.

193 Boulevard de Laval – 35500 VITRÉ (FRANCE)  
Tel France : +33 (0)2 90 64 00 40 - Tel Export : +33 (0)2 90 64 00 41  
[www.vitalys-surgical.com](http://www.vitalys-surgical.com)